



Forma®
Individual Abutment

Aditamentos a medida, tan personales
como sus pacientes

QUÉ ES FORMA® INDIVIDUAL ABUTMENT

Pilares a medida tan personalizados como sus pacientes

Experimente **la precisión, la estética y la fiabilidad** con Forma® Individual Abutment. Diseñados para obtener los mejores resultados clínicos para implantología, nuestros pilares individuales ofrecen resultados superiores tanto para los profesionales como para los pacientes.

Forma® Individual Abutment está diseñado para simplificar y optimizar las restauraciones de implantes, ofreciendo una solución versátil y fiable sea cual sea el caso. Tanto si necesita una **restauración atornillada o cementada**, Forma® Individual Abutment ofrece una precisión excepcional, estética, y estabilidad a largo plazo. En la mayoría de los casos recomendamos utilizar una solución atornillada por su mayor capacidad de recuperación y menor riesgo de complicaciones, y un mayor éxito a largo plazo.

¿Necesita un pilar angulado? ¡No hay problema!
Si la posición y/o angulación del implante requiere un enfoque diferente, también ofrecemos restauraciones cementadas, garantizando función y estética óptimas. Además, si se requiere un canal angulado, lo fabricamos sin coste adicional para determinadas marcas específicas.



FORMA® INDIVIDUAL ABUTMENT

Principios de su diseño



ESTÉTICA
Imitando los dientes naturales para obtener resultados superiores en relación a la estética.




RECUPERABILIDAD
La primera opción es una restauración atornillada para facilitar el acceso para ajustes y reparaciones. También en situaciones más comprometidas podemos suministrar un canal de tornillo angulado o un pilar sin compromiso.



HIGIENE Y BIOLOGÍA
El diseño individual favorece la accesibilidad para la limpieza, así como la creación del perfil de emergencia adecuado para mejorar la «adhesión» del tejido al pilar/corona del implante. Nuestro proceso de higienización está diseñado para ayudar a los dentistas garantizando un entorno limpio para una gestión óptima de los tejidos y el cuidado del paciente.

¿POR QUÉ ELEGIR FORMA® INDIVIDUAL ABUTMENT?

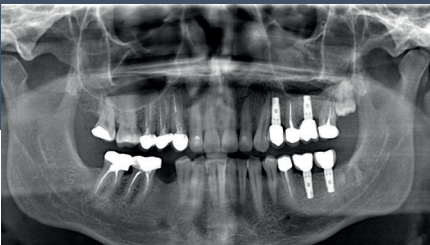

BUENA ESTÉTICA

- El estándar de oro para sus pilares individuales. Color dorado, pilares anodizados dorados para un aspecto natural y sin juntas.
- Optimización e individualización de forma, tamaño y color para una perfecta integración con dientes circundantes.



GESTIÓN PREDECIBLE DE LOS TEJIDOS

- Promueve una encía sana, reduciendo el riesgo de inflamación y periimplantitis.
- Una interfaz y línea de cementado sin juntas minimiza los espacios para mejorar la compatibilidad del tejido.



ESTABILIDAD Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

- Los tornillos recubiertos de TiN reducen el desgaste, la corrosión y el riesgo de aflojamiento.
- Distribución uniforme de la fuerza para reducir fallos mecánicos y una mayor longevidad.

CALIDAD ASEQUIBLE PARA TODAS SUS SOLUCIONES IMPLANTOLÓGICAS
En Modern Dental Europe, combinamos las últimas tecnologías con la artesanía para ofrecer soluciones de implantes de alta calidad muy apreciadas por dentistas de todo el mundo. Nuestro equipo de técnicos experimentados cuenta con amplios conocimientos de varios sistemas de implantes y utiliza las técnicas (digitales) para garantizar un ajuste perfecto y excelentes resultados estéticos.

Ofrecemos un proceso completo, desde la estrategia de escaneado hasta el pilar y la corona, para todos los sistemas de implantes habituales. Este proceso se gestiona íntegramente en nuestras propias instalaciones, lo que nos permite garantizar una alta calidad al tiempo que trabajamos de forma rápida y rentable.

Ofrecemos soluciones de primera calidad que superan los estándares de Ti base de los proveedores de implantes. Las impresiones para la producción de un caso pueden ser tanto analógicas como digitales. En el caso de las impresiones digitales, los archivos se nos pueden enviar fácilmente a través de su escáner actual, sin necesidad de equipos adicionales.



PILARES FORMA® INDIVIDUAL ABUTMENT

Ventajas de los pilares individuales

VENTAJAS DE LOS PILARES INDIVIDUALES FRENTE A PILARES TI-BASE ESTÁNDAR

El uso de pilares fabricados individualmente ofrece ventajas significativas frente a los pilares estándar Ti-Base. Los pilares estándar a menudo siguen un enfoque de «talla única», que no siempre ofrece los mejores resultados, para la anatomía específica del paciente. En cambio los pilares individuales se fabrican a medida, proporcionando un equilibrio óptimo entre función y estética.

Con los pilares individuales, podemos tener en cuenta las características únicas del paciente, como la alineación, volumen óseo y forma gingival. El resultado es un mejor ajuste y un aspecto más natural. También nos permite crear un perfil de emergencia preciso, que favorece la salud gingival y contribuye a unos resultados estéticos duraderos.



Otra ventaja clave de los pilares individuales es la posibilidad de planificación retrospectiva. Al diseñar la restauración con el resultado final en mente, el pilar y la restauración están perfectamente alineados, lo que se traduce en unos resultados estéticos y funcionales óptimos.

Este enfoque proporciona un punto de partida superior comparado con los pilares estándar. Hace que los pilares individuales sean la elección perfecta para los clínicos que buscan optimizar tanto funcionalidad como estética, ofreciendo a los pacientes una solución de primer nivel.




PILARES FORMA® INDIVIDUAL ABUTMENT

Funcionalidad y estética

PILARES ANODIZADOS - BIOCOMPATIBILIDAD Y BASE PERFECTA PARA LA ESTÉTICA “PINK & WHITE”

Nuestros pilares individuales de titanio Forma® Individual Abutment están anodizados, ofreciendo una excelente combinación de biocompatibilidad y estética, convirtiéndolos en la elección ideal para restauraciones de implantes tanto en zonas posteriores como estéticas. El anodizado del titanio confiere al pilar un tratamiento superficial único, favoreciendo la integración con el tejido circundante y minimizar el riesgo de decoloración gingival.

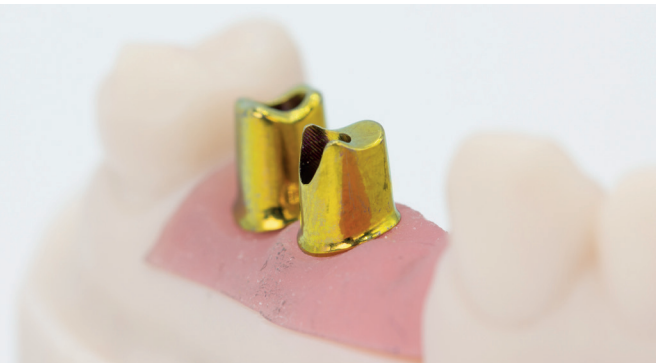

BIOCOMPATIBILIDAD

Anodizar el titanio mejora la biocompatibilidad del pilar, garantizando una mejor integración con la encía y reduciendo el riesgo de inflamación o irritación. Esto no sólo contribuye a unos tejidos más sanos, sino que también mejora la durabilidad de la solución implantológica.

SUPERFICIE ARENAD

La superficie de nuestros pilares está arenada para favorecer una conexión más segura y mejorar la unión entre el pilar y el cemento. Este proceso también genera una mayor durabilidad y estabilidad del implante en general, minimizando el riesgo de desplazamiento o fracaso, y garantizando una restauración más duradera.



ESTÉTICA “PINK & WHITE”

Nuestros pilares anodizados forman la base perfecta para la armoniosa estética «pink & white». La sutil coloración del pilar evita que se vea la encía, lo que resulta en un aspecto más natural y estético. Los pilares también proporcionan una base estable y estética tanto para la encía («rosa») como para la corona («blanco»), mejorando el equilibrio visual general y la estética del implante.

OPCIONAL: PILAR CON CONEXION ORIGINAL

Esta es una combinación de un pilar original preformado, que diseñamos y producimos nosotros.

Estos pilares pre-fresados se producen en nuestras propias fresadoras. La conexión preformada no se toca en este proceso de producción, sino que todo lo que se encuentra por encima del cuello del implante se fresa individualmente en función del diseño específico del paciente. Esto ofrece lo mejor de ambos mundos; un pilar diseñado individualmente, así como la garantía del original-sobre-original.

Al elegir Forma® Individual Abutment, está optando por una solución biocompatible que eleva tanto la estética como la funcionalidad de sus restauraciones sobre implantes.


PILARES FORMA® INDIVIDUAL ABUTMENT

Con canal de tornillo angulado

FLEXIBILIDAD SIN COMPROMISO

En Modern Dental, entendemos que cada restauración implante conlleva sus propios retos. Por eso ofrecemos pilares con canal de tornillo angulado. Esta innovación de ofrece una solución para casos complejos en los que la apertura del tornillo no puede colocarse en la posición ideal. Con este pilar, puede corregir la apertura del tornillo hasta 25 grados, garantizando un posicionamiento y una estética.

Una gran ventaja de este canal de tornillo angulado es que no afecta a la calidad ni a la estética de la restauración final.

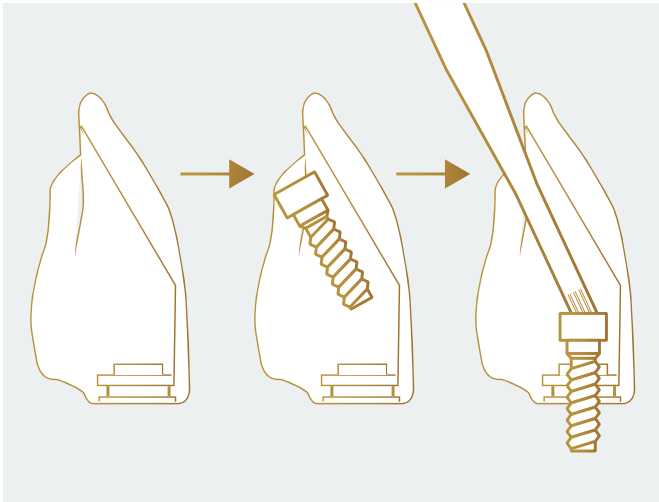

UN PRECIO PARA TODAS LAS SITUACIONES

Mantenemos el mismo precio tanto para pilares estándar como los pilares con canal de tornillo angulado. Esto significa que para cualquier situación, independientemente de su complejidad, puede confiar en un producto final de alta calidad sin costes adicionales. Esto convierte a Forma® Individual Abutment en una solución rentable para todos los tratamientos que requieran un canal de tornillo angulado, sin comprometer la calidad ni la estética.

Con Forma® Individual Abutment, puede enfrentarse a cualquier reto, sabiendo que recibirá un implante perfectamente adaptado sin importar la situación, al mismo atractivo precio.

TORNILLOS ESTAÑADOS

El nuevo estándar

TORNILLOS CON RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO PARA UNA DURABILIDAD Y ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

Nos esforzamos por ofrecer soluciones implantológicas de la máxima calidad y durabilidad. Por ello, todos nuestros tornillos protésicos vienen con un recubrimiento de nitrato de titanio (TiN), estableciendo el estándar de durabilidad y estabilidad. Estos tornillos recubiertos de TiN ofrecen numerosas ventajas para usted como clínico:



1. COMPATIBILIDAD PERFECTA

Cada tornillo es idéntico en forma, rosca y conexión a los tornillos originales del sistema de implantes. Esto significa que si alguna vez es necesario sustituir un tornillo, puede hacerse sin esfuerzo con un tornillo original del implante correspondiente. Esto garantiza que los pacientes, incluso cuando son tratados por otro dentista o en una situación de emergencia, no se encontrarán con ningún problema.

2. MAYOR ESTABILIDAD


Gracias al recubrimiento de TiN, se reduce significativamente el riesgo de que los tornillos se aflojen. Las investigaciones demuestran que el recubrimiento ayuda a mejorar la estabilidad de la unión atornillada, alargando la vida útil de la restauración y reduciendo el riesgo de complicaciones.

3. USO DE 'TORNILLOS DE LABORATORIO'


Cada pieza Forma® Individual Abutment viene con 'Tornillos de Laboratorio' especiales para su uso durante el proceso de laboratorio. Estos tornillos, reconocibles por su color azul, garantizan que los tornillos clínicos finales recubiertos de TiN sólo se utilicen al colocar la restauración en la boca. Esto evita el desgaste del revestimiento de TiN, manteniendo la calidad para la colocación final.



FLUJO DE TRABAJO DIGITAL de 3 a 5 pasos

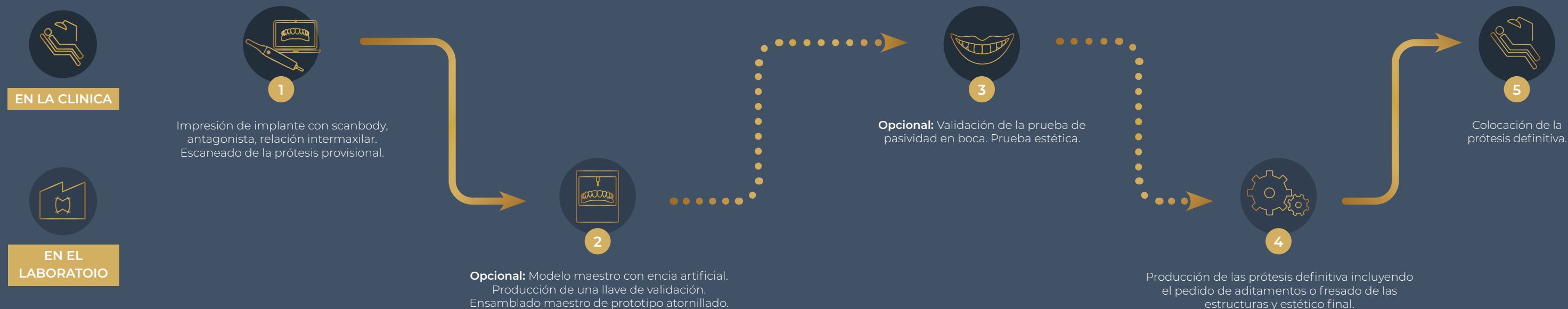

FLUJO DE TRABAJO ANALÓGICO de 5 a 7 pasos

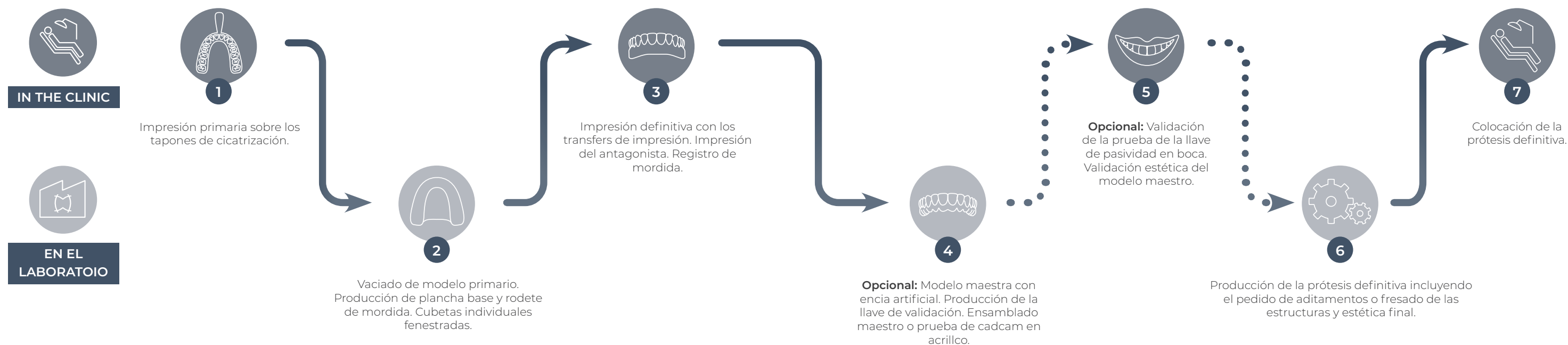


IMPRESIONES DIGITALES VS ANALÓGICAS

Las ventajas de nuestra tecnología y Scanbodies

Puede enviar sus impresiones de la forma que mejor se adapte a su flujo de trabajo: digital o analógica. Las impresiones analógicas pueden enviarse por mensajería, como de costumbre. Esta sigue siendo una opción fiable, pero cada vez más profesionales dentales optan por las ventajas de las impresiones digitales, en las que la precisión, la rapidez y la eficacia son fundamentales.

IMPRESIONES DIGITALES: MÁS RÁPIDAS Y PRECISAS

Con las impresiones digitales, los datos pueden transmitirse fácilmente a través de sus escáneres existentes. Forma® Individual Abutment es compatible con todos los sistemas de escaneo digital habituales, como Medit, 3Shape y Eletra, garantizando una integración perfecta con nuestros procesos de producción. El uso de impresiones digitales ofrece importantes ventajas: elimina la posibilidad de errores al enviar y procesamiento de modelos físicos, ahorra tiempo y aumenta la precisión de la restauración final.

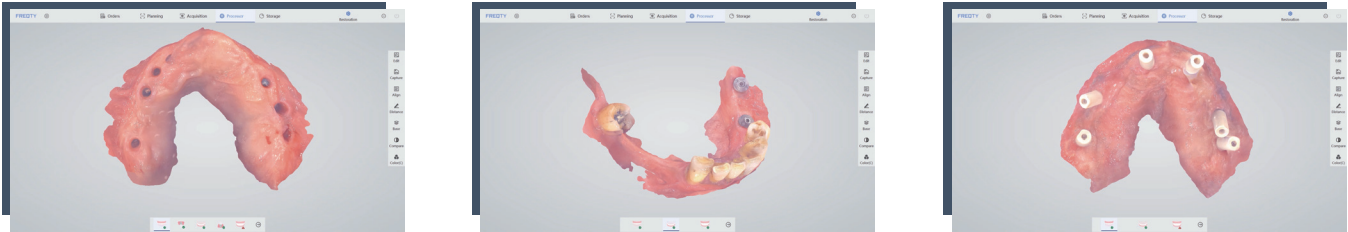

El Comienzo de su Viaje Digital

IMPRESIONES DIGITALES VS ANALÓGICAS

Las ventajas de nuestra tecnología y Scanbodies

IMPORTANCIA DE SCANBODIES PARA IMPLANTES PRECISOS

Para garantizar la máxima precisión de nuestros pilares y supraestructuras a medida, recomendamos utilizar nuestros cuerpos de escaneo intraorales. Estos cuerpos de escaneo están fabricados en titanio, pueden apretarse sin destornillador y no tienen orificio para tornillos, lo que evita distorsiones en los datos de escaneo. Esto garantiza los resultados más precisos al escanear implantes.



Además, nuestros cuerpos de escaneo ofrecen más ventajas:

- Pueden colocarse en la boca sin herramientas, lo que simplifica y acelera el flujo de trabajo.
- Gracias al uso de titanio y al revestimiento de nitrato de Zr, estos cuerpos de escaneo son resistentes a la esterilización repetida, lo que los hace resistentes a la esterilización repetida, lo que los hace duraderos y fiables en cualquier situación clínica.

Tanto si elige un método de impresión digital o analógica, con Forma® Individual Abutment puede confiar en un proceso de producción impecable y resultados de la más alta calidad. Nuestra avanzada combinada con instrumentos de precisión, como nuestros soluciones de implantes perfectas en todo momento.



NORMAS DE CALIDAD DE

Proceso de producción

NUESTRAS NORMAS DE CALIDAD: UNA REFERENCIA INIGUALABLE EN EL SECTOR

En Modern Dental, la calidad está en el centro de todo lo que hacemos. La implantación y el estricto cumplimiento de nuestro SGC (sistema de gestión de calidad) es una parte esencial de nuestro proceso. Esto nos permite suministrar globalmente productos que cumplen los más altos requisitos legales y las normas de cada mercado. Nuestros productos están certificados con las normas de calidad incluida la ISO 13485:2016 para productos sanitarios y la ISO 9001:2015 para la gestión general de la calidad. Esto garantiza que cada producto Forma® Individual Abutment cumple con las más altas exigencias de seguridad, fiabilidad y durabilidad.


Nuestra producción utiliza fresadoras de alta precisión de última generación, que también utilizan los principales fabricantes de implantes. Cada producto se somete a un proceso de calidad cuidadosamente controlado, para garantizar la máxima precisión y consistencia. Desde las materias primas hasta el producto acabado se controla meticulosamente para garantizar que nuestros clientes reciban sólo lo mejor.

Con Forma® Individual Abutment, usted tiene la garantía de calidad y precisión, respaldada por las principales certificaciones y un compromiso de la perfección en cada paso del proceso de producción.



FASE DE DISEÑO

Gracias a nuestra gran escala, contamos con un equipo completo de empleados para cada tipo de escáner que están especializados en la fabricación de trabajos específicos de laboratorio.

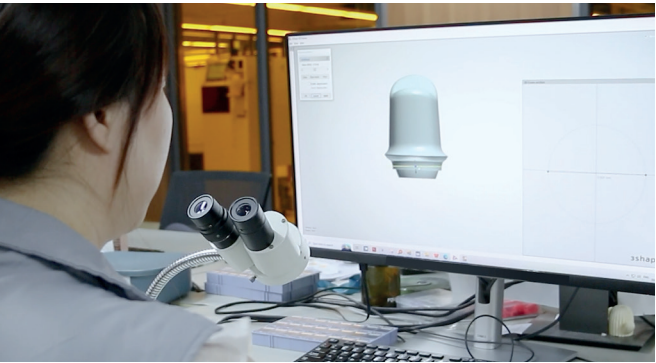

SOFTWARE

A pesar de que la mayoría de los fabricantes afirman tener sistemas «abiertos», la práctica demuestra que no todas las soluciones son posibles sin disponer del software específico. Poseemos los paquetes de software de casi todos fabricantes de implantes.



PRODUCCIÓN

Disponemos de las mismas fresadoras de alta calidad por conocidas marcas de implantes para fresar nuestras supraestructuras.



CONTROL E INSPECCIÓN

Guiados por nuestra propia investigación científica y clientes, mejoramos continuamente el diseño de nuestros productos. Las superficies son ahora aún más ajustadas, con las tolerancias más bajas para un resultado final de alta calidad.

NORMAS DE CALIDAD

Procedimientos de desinfección y envío

PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y ENVÍO - LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD SON LO PRIMERO
Antes de que su pieza salga de nuestro laboratorio, se somete a un cuidadoso y exhaustivo proceso de desinfección. Este exhaustivo proceso de limpieza ayuda a reducir el riesgo de periimplantitis. Mediante la aplicación de este estricto procedimiento de desinfección, garantizamos la seguridad y la higiene de cada pieza de trabajo, para que llegue a su consulta en condiciones óptimas.



ENPQUETADO DE TORNILLOS DE LABORATORIO
Todos los tornillos de laboratorio se embalan individualmente. Se coloca una pegatina transparente con la inscripción «Tornillo de laboratorio» en el lado de la abertura de la bolsa para recordar que no se puede abrir la bolsa para recordar que no puede utilizarse clínicamente.

En Forma® Individual Abutment, no tomamos riesgos cuando se trata de la seguridad y calidad de nuestros productos. Nuestro proceso de envío garantiza que su pieza de trabajo llegue limpia, segura y totalmente lista para su uso clínico.



NORMAS DE CALIDAD

Garantía

Ofrecemos sólidas garantías para que siempre disponga de una solución fiable:
15 años de garantía para nuestros pilares y coronas de titanio Forma® Individual Abutment.

Si surge algún problema con un implante debido a un producto Forma® Individual Abutment nos encargamos de las negociaciones de garantía con el proveedor del implante y, en caso necesario, para que usted no tenga nada de qué preocuparse.

Con Forma® Individual Abutment, puede confiar en productos de máxima calidad, respaldados por una sólida política de garantía, lo que le permite centrarse en el cuidado del paciente.

– Para conocer nuestra política completa y más reciente, visite nuestro sitio web.





Trees for All

