

TRIOTM
CLEAR

MEDIT



MANUAL DEL USUARIO

Integración de Medit Link con TrioClear Connect
v20230105

ÍNDICE

REGISTROS DE REVISIÓN 03

1.0 DESCARGAR EL PROGRAMA TRIOCLEAR CONNECT EN APP BOX04

2.0 CREAR UN NUEVO CASO05

3.0 ESCANEAR ARCHIVOS.....06

4.0 INTEGRACIÓN CON TRIOCLEAR™ CONNECT08

 4.1 INICIAR SESIÓN EN TRIOCLEAR™ CONNECT.....08

 4.2 OLVIDÉ LA CONTRASEÑA.....09

 4.3 REGISTRAR UNA CUENTA TRIOCLEAR™09

5.0 PRESENTAR UN PROYECTO DE CASO 10

6.0 VER EL BORRADOR DEL CASO EN LA PLATAFORMA TRIOCLEAR™ 11




REGISTROS DE REVISIÓN

VER.	FECHA	ACTUALIZADOR	NOTA
v20221207	7 de diciembre de 2022	Crystal Yeung	Versión inicial
v20230105	5 de enero de 2023	Kelvin Cheung	Añadir App box descargar Trio Proceudre




1.0 DESCARGAR EL PROGRAMA TRIOCLEAR CONNECT EN APP BOX


1. Después de iniciar sesión en el sistema Medit Link, vaya al App Box.

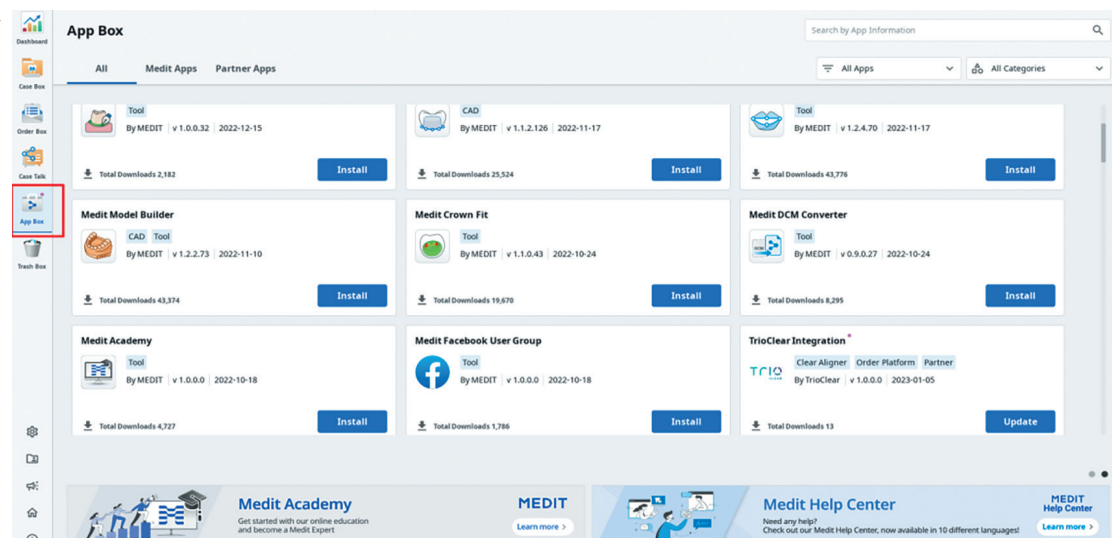

2. Busque la aplicación TrioClear™ Connect haga click en el botón de instalación para instalarla.


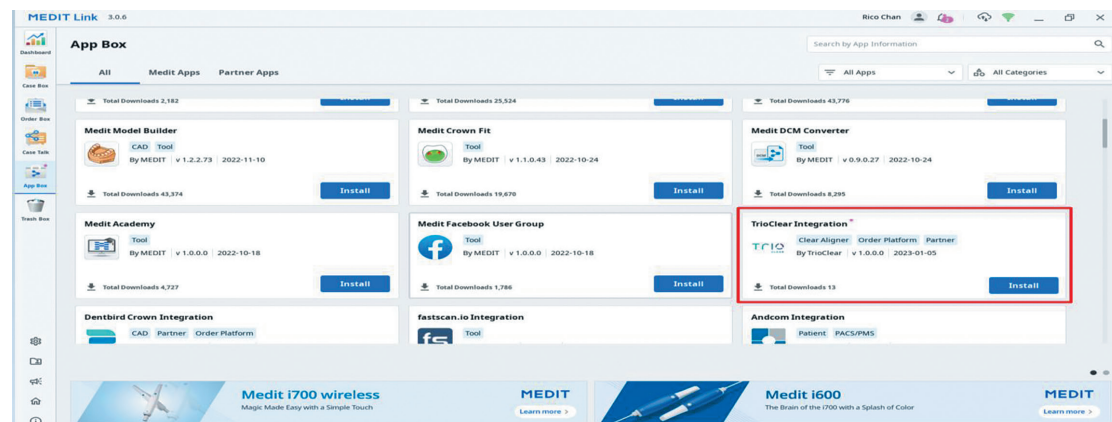


3. Una vez que la aplicación se haya instalado por completo, verá el icono de la aplicación en la.

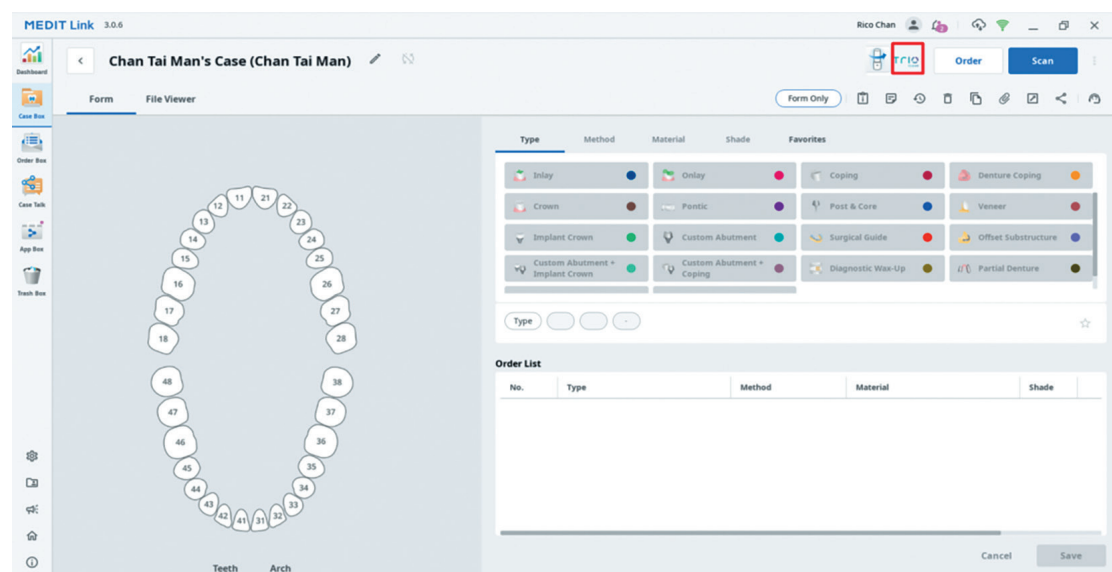

2.0 CREAR UN NUEVO CASO

1. Cuando el Doctor entre en Medit Link, vaya a Case Box
2. Haga click en el botón Nuevo caso para introducir la información del nuevo caso
3. Introduzca el nombre del paciente y el nombre del caso
4. Pulse el nuevo caso del botón "Registrar y escanear"

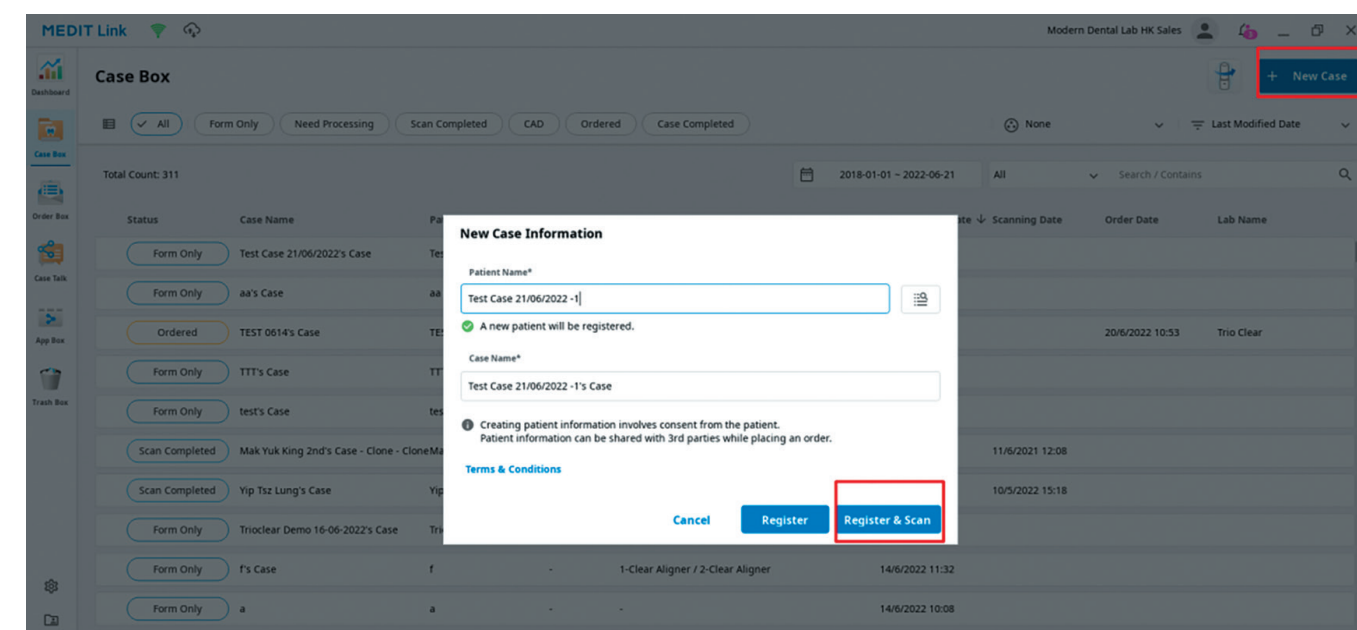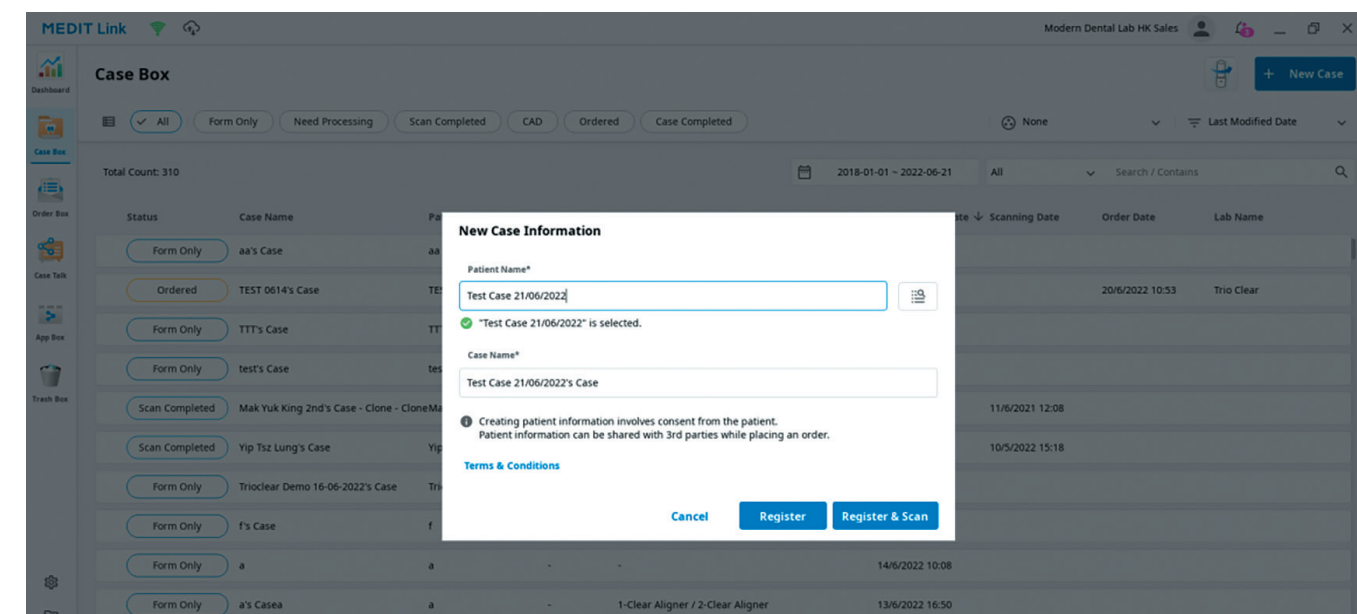

Trio



CLEAR

3.0 ESCANEAR ARCHIVOS

1.


Pulse el botón Escanear
2.

El doctor escanea los archivos STL (se requiere maxilar o mandíbula) para enviar un caso a TrioClear™.

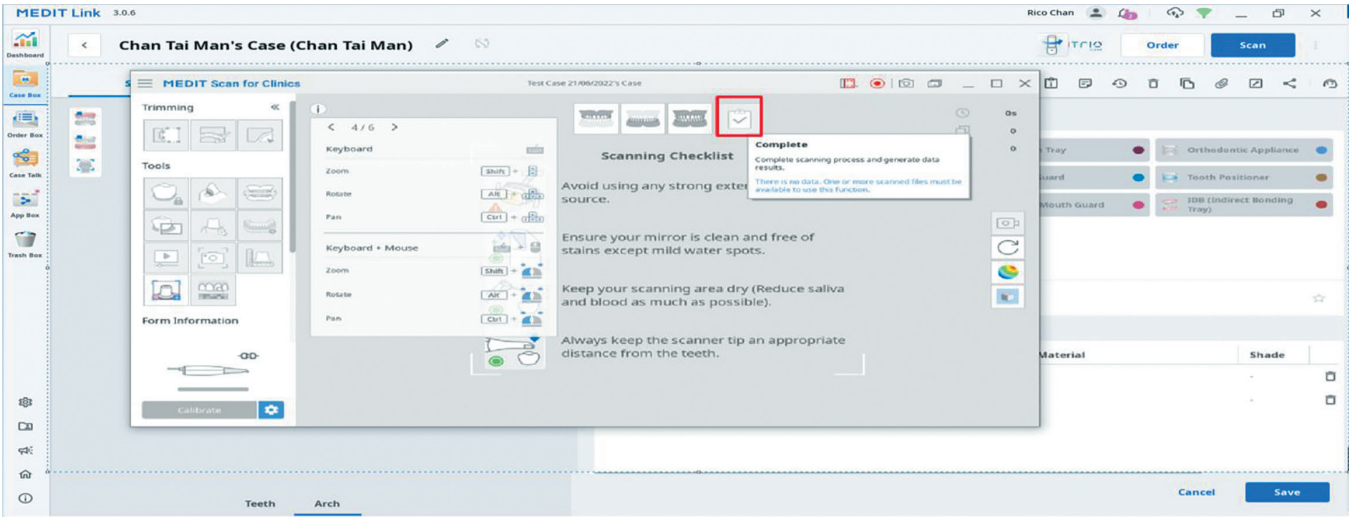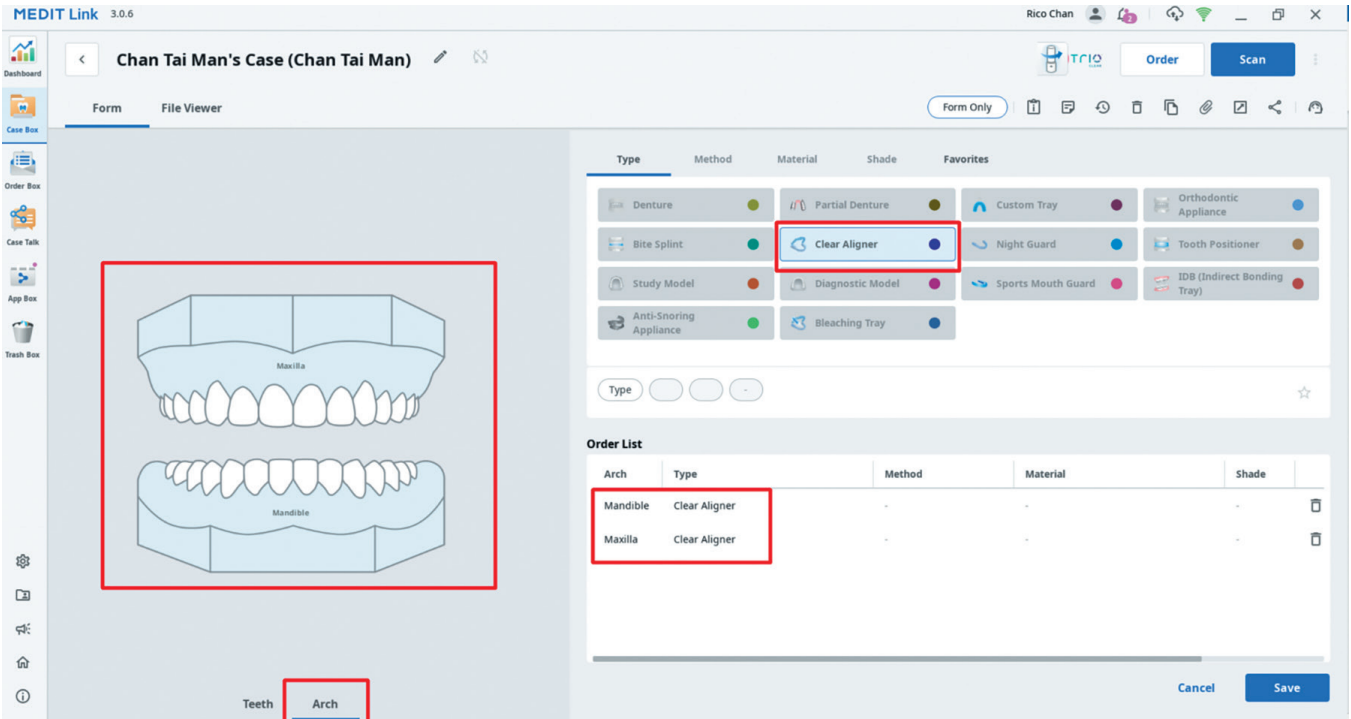


4.1 INICIAR SESIÓN EN TRIOCLEAR™ CONNECT

1. Para un caso de escaneo completado, Haga click en el botón plugin (LogoTrioclear™)

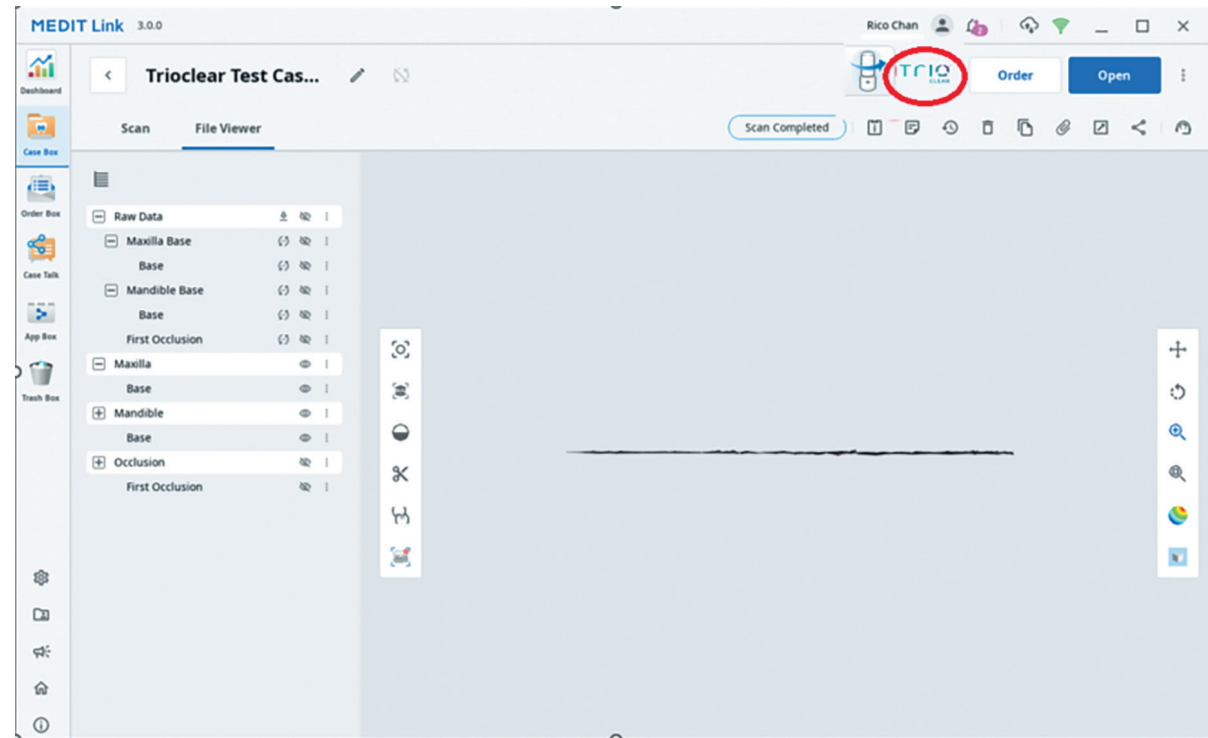


Aparecerá la página de inicio de sesión de TrioClear™.

1. Inicio de sesión de médico por TrioClear™ cuenta de médico con correo electrónico y contraseña
2. Haga click en el botón “iniciar sesión”

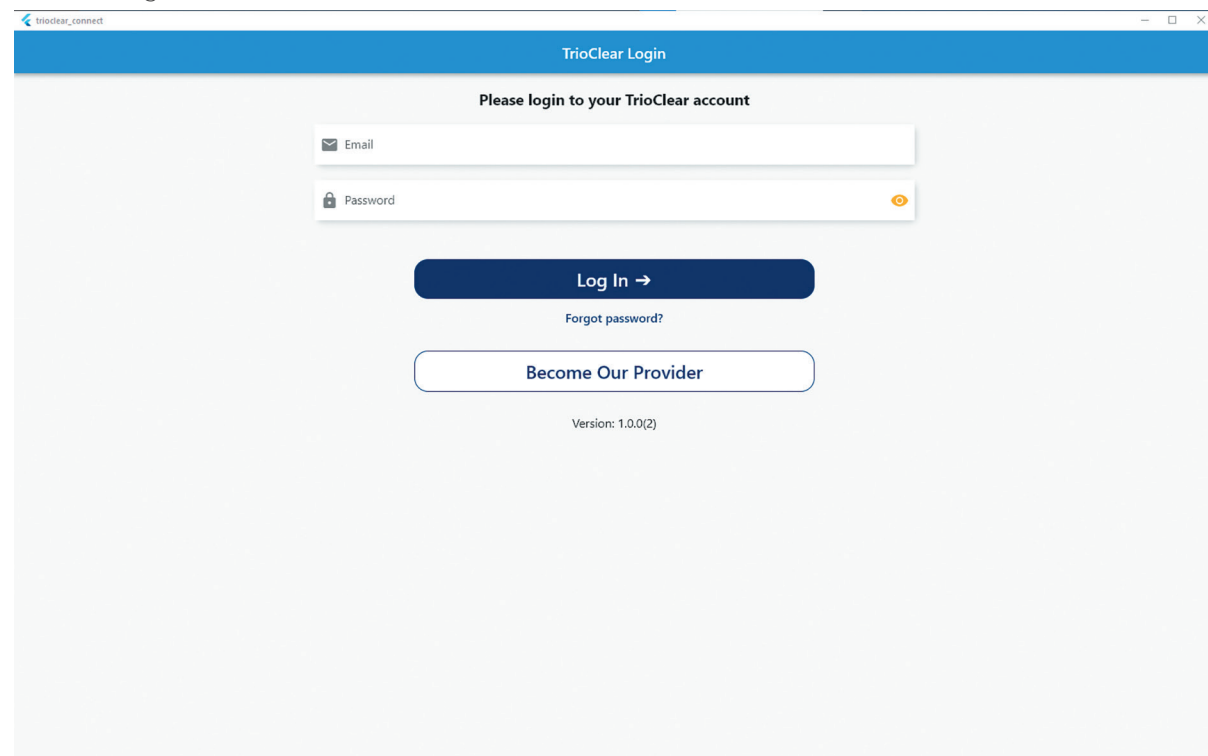


4.2 OLVIDÉ LA CONTRASEÑA

Si el Doctor olvida la contraseña, haga click en el botón Olvidar contraseña para redirigirse a la página de restablecimiento de contraseña de TrioClear™.

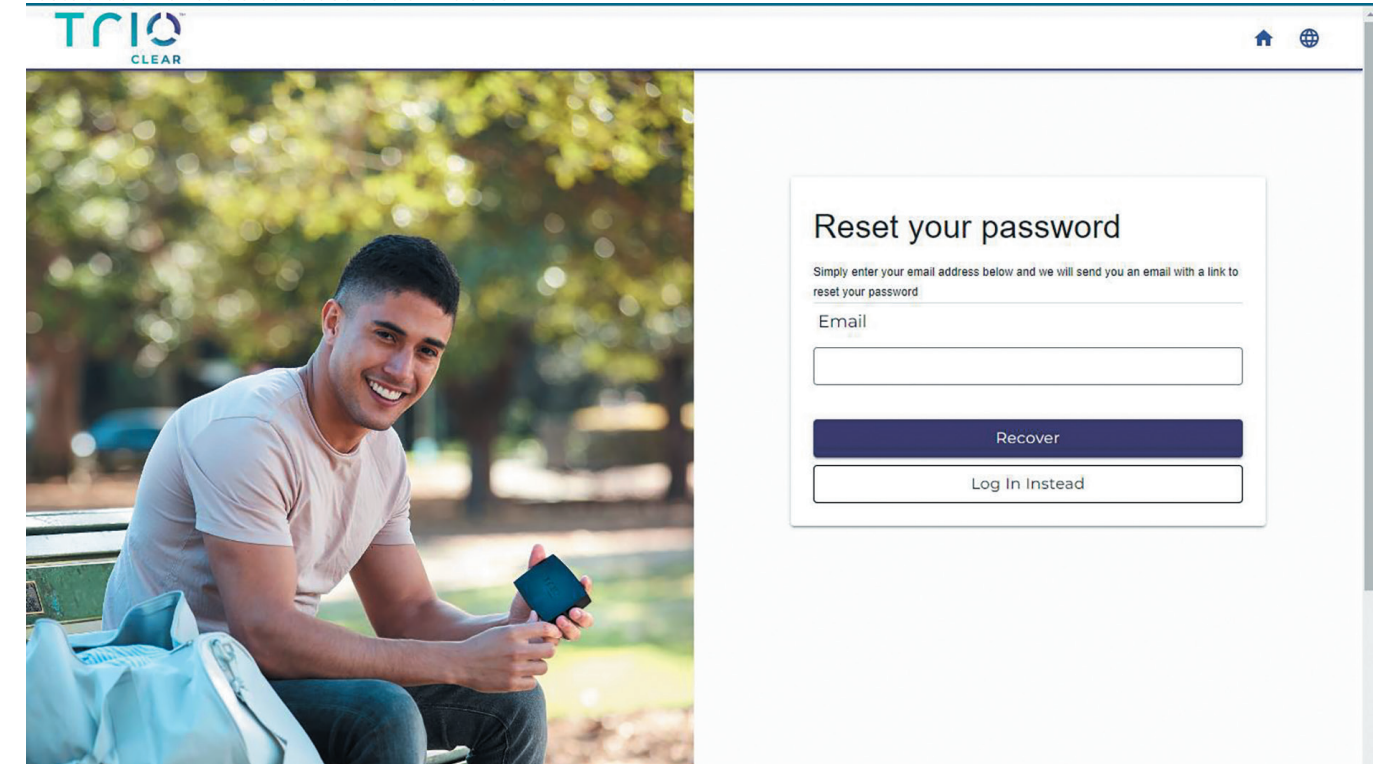

4.3 REGISTRAR UNA CUENTA TRIOCLEAR™

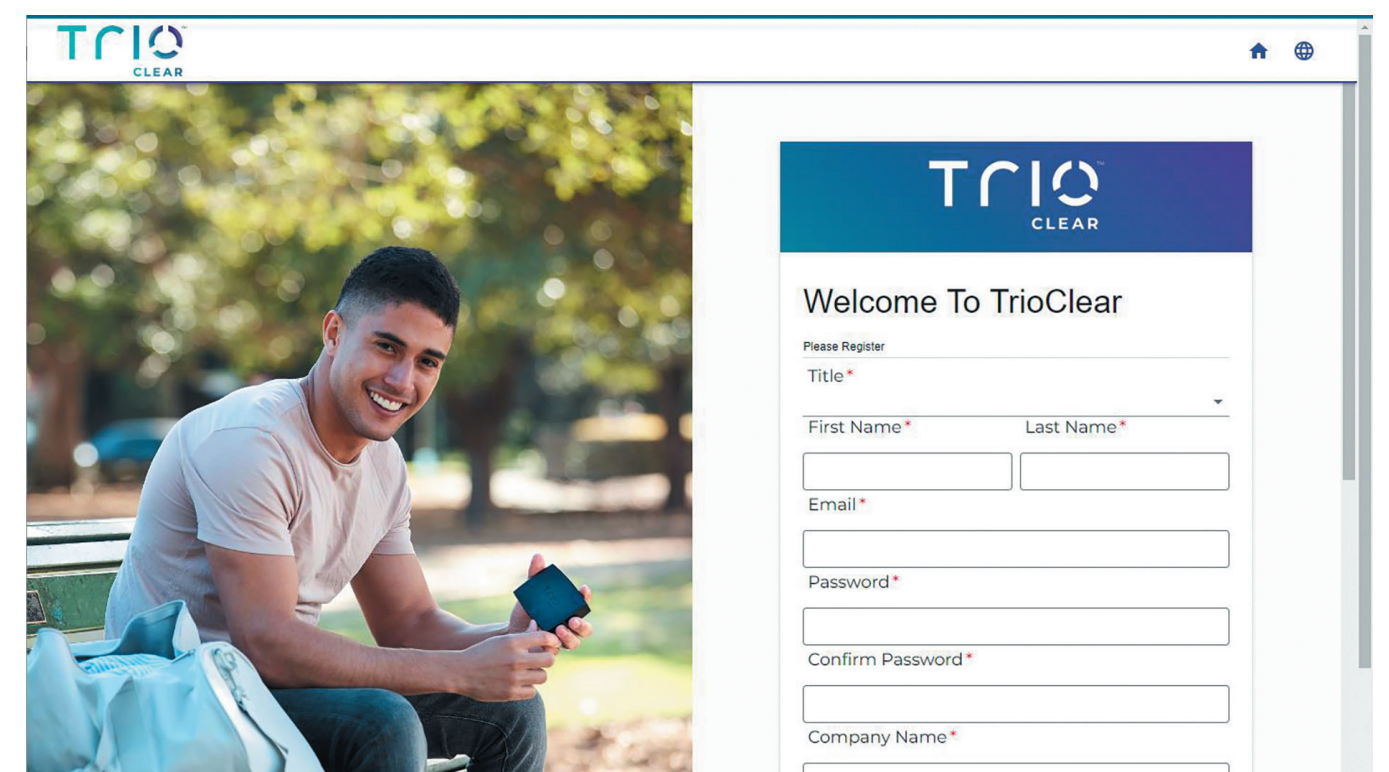

Si el usuario es un nuevo usuario que no tiene una cuenta TrioClear™, haga click en el botón “Conviértase en nuestro proveedor” para registrar una nueva cuenta.

5.0 PRESENTAR UN PROYECTO DE CASO

1. Después de iniciar sesión en la cuenta TrioClear, se mostrará la página Enviar Borrador de Caso

Submit Draft Case

Account: crystal.yeung@businstaff.comLogout

Create new case

New Case Option

☐ Simple

☐ Touch Up

☐ Touch Up +

☐ complete

☐ Retainer

Patient Name

* For EU Customers, please enter only initials or patient number due to GDPR

Upload STL files and Create Draft Case

Create Draft Case

* The STL files will be upload automatically by clicking Create Draft Case button

2. El médico rellena la información del nuevo caso con el tipo de caso y el nombre del paciente
3. El médico pulsa el botón "Create Draft Case" para enviar el borrador del caso

Submit Draft Case

Account: crystal.yeung@businstaff.comLogout

Create new case

New Case Option

☐ Simple

☐ Touch Up

☐ Touch Up +

☐ complete

☐ Retainer

New Case Created

Draft Case created successfully!
Please login to TrioClear to edit the case.

Close

First Name

Last Name

* For EU Customers, please enter only initials or patient number due to GDPR

Upload STL files and Create Draft Case

Create Draft Case

* The STL files will be upload automatically by clicking Create Draft Case button

- 4.Tras el envío, se mostrará el mensaje de confirmación
5. El borrador del caso con los archivos STL escaneados se envían a TrioClear con éxito

6.0 VER EL BORRADOR DEL CASO EN LA PLATAFORMA TRIOCLEAR™

1. El médico puede hacer click en el botón "Ir a la plataforma Trioclear" para ver el borrador del caso y completar el envío del caso dentro de la plataforma TrioClear después de enviar el borrador del caso..

Submit Draft Case

Account: crystal.yeung@businstaff.comLogout

Touch Up +

complete

Retainer

Patient Name

First Name

Last Name

* For EU Customers, please enter only initials or patient number due to GDPR

Upload STL files and Create Draft Case

Create Draft Case

* The STL files will be upload automatically by clicking Create Draft Case button

Open TrioClear Website

Go to TrioClear Platform →

Version: 1.0.0 (C)

2. Después de hacer click en este botón, será redirigido y auto conectado a la página de gestión de casos de la plataforma TrioClear™.

Welcome Doctor, Dr. Chan

Case Management

Account Summary

Support and Resources

Build your Gems to Success with

TRIOGRAM

New Case

Search or Filter

All

Case Log Unread Message

Chatroom Unread Message

Pending Actions

Treatment in Progress

Completed

Archived

Case Row: Waiting for your action

Case Row: Treatment in progress

Notification: Status Update • Unread Message

Actions ↓

Case Status

Profile

First Name

Last Name

Gender

Patient ID

Treatment Option

Approval Date

Treatment End Date

Age

Submission Date

Plan

18 Aug

3. El médico puede ver todos los borradores de casos enviados con el nombre del paciente rellenado y el STL cargado a través de la integración de MeditLink.

Treatment in Progress Completed Archived											
Case Row: Waiting for your action Case Row: Treatment in progress Notifications Status Update + Unread Message											
Actions	Case Status	Profile	First Name	Last Name	Gender	Patient ID	Treatment Option	Approval Date	Treatment End Date	Age	Submit Date
	Draft		Test	123	Male	4699	Complete	07 Dec 2022	07 Dec 2025	0	N/A
	Draft		Test	1207	Male	4698	Touch Up	07 Dec 2022	07 Dec 2025	0	N/A
	Draft		test1	122	Male	4690	Touch Up +	05 Dec 2022	05 Dec 2025	0	N/A

New Case - Patient Info

+
Upload patient profile picture (optional)

*First Name
Test

*Last Name
1207

*For EU Customers, please enter only initials or patient number due to GDPR

Gender

MaleFemaleOther

Date of Birth

DayMonthYear

7122022

Remarks

Remarks


New Case - Impression

Upload the impressions

Upload STL Files

+

🗑

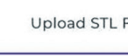

Upper STL

Physical Impressions by Courier

+

🗑



Lower STL

Digital Impressions Sent by Intraoral Scanner Portal

+

🗑



Bite 1 STL

+

🗑



Bite 2 STL

4. El médico puede rellenar el resto de la información necesaria para presentar el caso en TrioClear™.

NOTAS

